



Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen,
kijk dan op unilabs.nl.

Afname-instructie

Vaginaal onderzoek


- Kweek bacterieel
- Kweek gisten
- Trichomonas

Welkom bij Unilabs

Uw behandelend (huis)arts heeft diagnostiek voor u aangevraagd waarvoor u zelf de afname uitvoert. In deze instructie wordt de afname stap voor stap uitgelegd. Voor een goede afname vragen we u de instructies vooraf goed door te nemen.

Belangrijk om te weten voor de zelfafname


- Het materiaal binnen 24 uur na afname inleveren.
- Stop minimaal 2 dagen voor de afname met het gebruik van vaginale producten.
- Wanneer er vloeistof uit het buisje is gemorst is de afnameset niet meer bruikbaar.
- Was uw handen voor de afname goed met water en zeep en droog uw handen goed af.

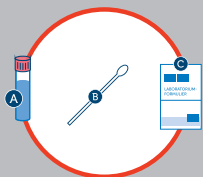

1


Wat heeft u meegekregen:

- a. Buisje met vloeistof
- b. Swab
- c. Aanvraagformulier

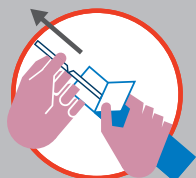


2

Open de verpakking en haal de swab eruit met het watje naar beneden. **Let op: De swab boven het gekleurde breekpunt vastpakken.**

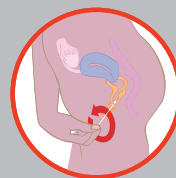


3

Neem een comfortabele positie in en spreid de schaamlippen. Breng de swab ongeveer 5 cm in de vagina en draai hem gedurende 30 seconden rond langs de vagina wanden. Verwijder de swab zonder de huid te raken.

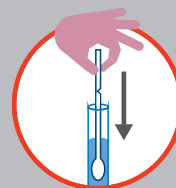

4

Schroef de dop van het buisje terwijl u de swab in uw hand houdt. Plaats de swab met het watje naar beneden in het buisje. Let op dat er geen vloeistof uit het buisje morst.

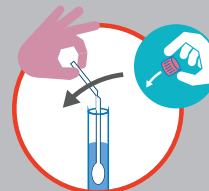

5

Breek de steel af op de inkeping en sluit het buisje door de dop goed vast te draaien. Gooi het afgebroken stukje weg.

Noteer op het buisje uw naam, geboortedatum en "vaginaal".

6

Plaats de buis en het aanvraagformulier in het zakje waar u het materiaal heeft uitgehaald. Plak het zakje dicht met de plakstrip aan de binnenzijde en lever het materiaal binnen 24 uur in bij een Unilabs locatie. Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op www.unilabs.nl/locaties

Waarschuwing

Bij spatten van vloeistof uit het buisje op de huid onmiddellijk met water en zeep afwassen, in de ogen: onmiddellijk met water spoelen. Mocht er toch nog irritatie ontstaan neem dan contact op met uw huisarts.